
Yazılım Başlangıç Sayfası

Kategory	**tester**
Bölüm	**Yazılım Ana Sayfası**
Dil	**Türkçe**
Oluşturuldu	**2026-11-04**

Yazılımın “Start” sayfası, yazılım açıldığında kullanıcının karşılaştığı ilk sayfadır. Sağ üst köşede yazılımın sürüm adı (“Stable” veya “Test”) ve sürüm numarası görüntülenir.

Vebko tarafından yazılımın yeni bir sürümü yayımlandığında ve internet bağlantısı mevcut olduğunda, sağ üst köşede “New Version is Available” seçeneği görüntülenir. Bu seçeneğe tıklayarak yazılımın en güncel sürümünü indirip kurabilirsiniz.

“What’s New” seçeneğine tıklandığında, yazılımın farklı sürümlerinde yapılan düzeltmelerin ve eklenen yeni özelliklerin gösterildiği bir sayfa açılır. Bu sürümler hazırlanırken önce Vebko uzmanları yazılımla ilgili sorunları ve önerileri yazılım ekibine iletir. Ardından yazılım ekibi bu bildirimleri değerlendirir ve gerekli düzeltmeleri gerçekleştirir. Eklenen yeni özellikler ve yapılan değişiklikler bu sayfada ayrıntılı olarak gösterilir.

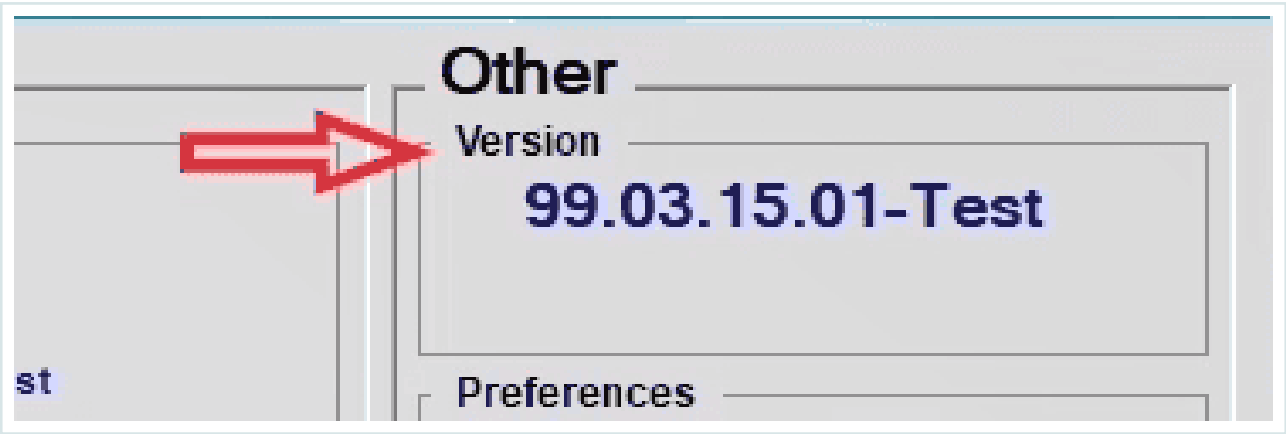


Şekil 1

“Launch Remote Help” seçeneğine tıklandığında, “AnyDesk” veya “Ammyy Admin” olmak üzere mevcut iki yöntemden biri kullanılarak çevrimiçi yazılım desteğine bağlanılabilir. AnyDesk kullanmak için kullanıcı, “New Connection” sayfasının sol üst kısmında bulunan ve “AnyDesk ID” olarak adlandırılan 9 haneli numarayı destek ekibine iletmelidir. Ardından destek personeli bu kodu “Remote Desk” bölümüne girer ve kullanıcının “Desktop” ekranına bağlanmak için “Connect” seçeneğine tıklar.




Şekil 2

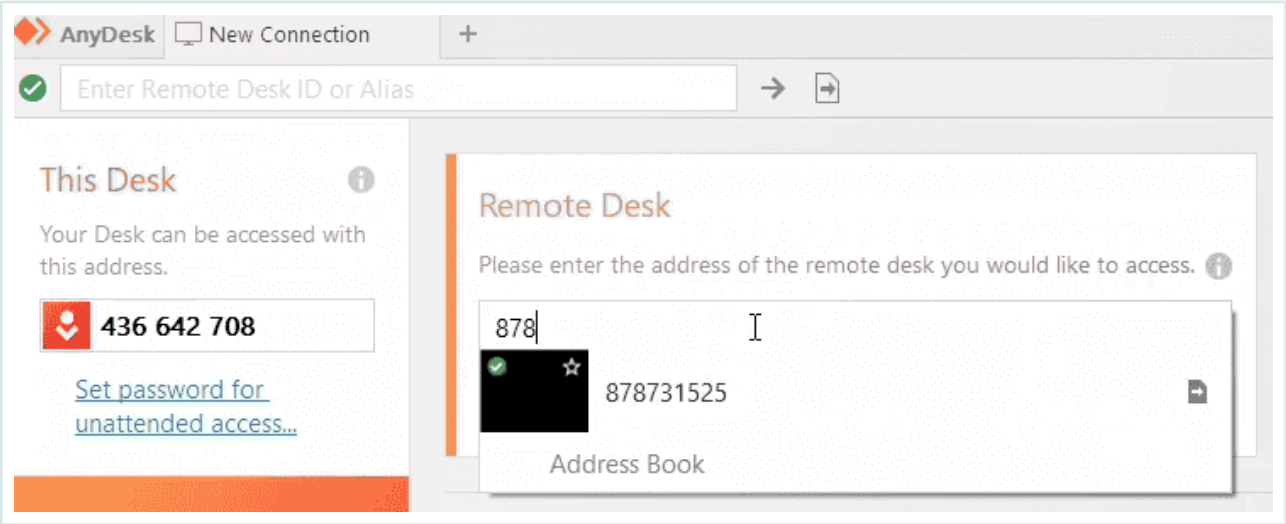

Şekil 3

Ayrıca “Ammyy Admin” seçeneğine tıklandığında “Ammyy Admin-Free” sayfası açılır. Kullanıcı, burada görüntülenen “ID” ve “Password” bilgilerini destek personeline iletmelidir. Ardından destek personeli bu bilgileri girerek kullanıcının masaüstüne bağlanabilir.

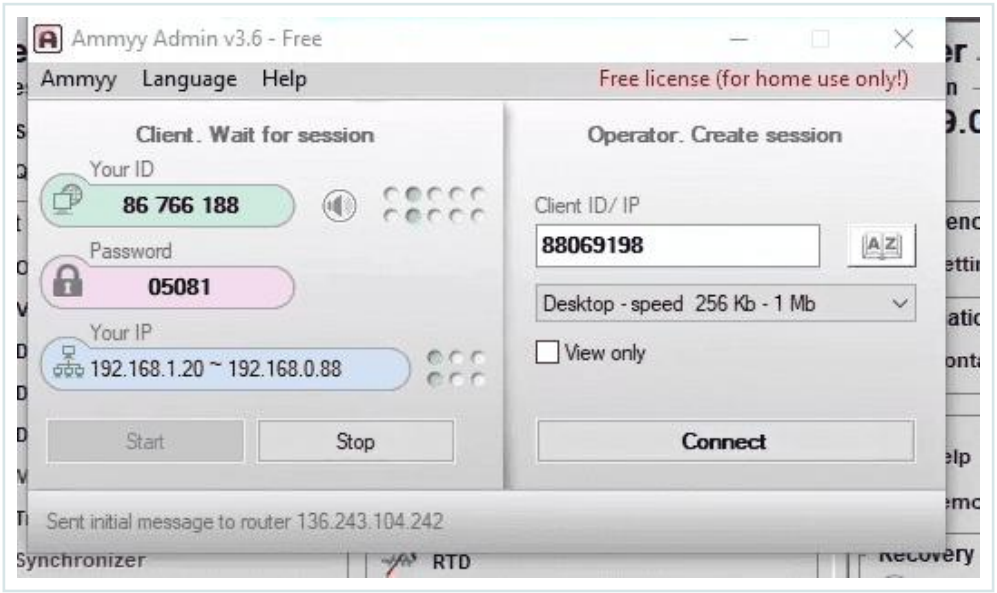

Şekil 4

“Relay Modules” bölümü, Vebko rölelerine özel yazılımları içerir. “Tester Modules” bölümünde ise farklı röle test odaları sol tarafta, ekipman test odaları ise sağ tarafta yer alır.




Şekil 5

“Preferences” seçeneğine tıklayarak tüm test sayfalarına ait ayarları düzenleyebilirsiniz. Tüm odalarda, ekranın sağ üst kısmında iki harf ve iki sayı görebilirsiniz:



Şekil 6


1- “M”, bu sayfanın RAM üzerinde kaç megabayt alan kullandığını gösterir.

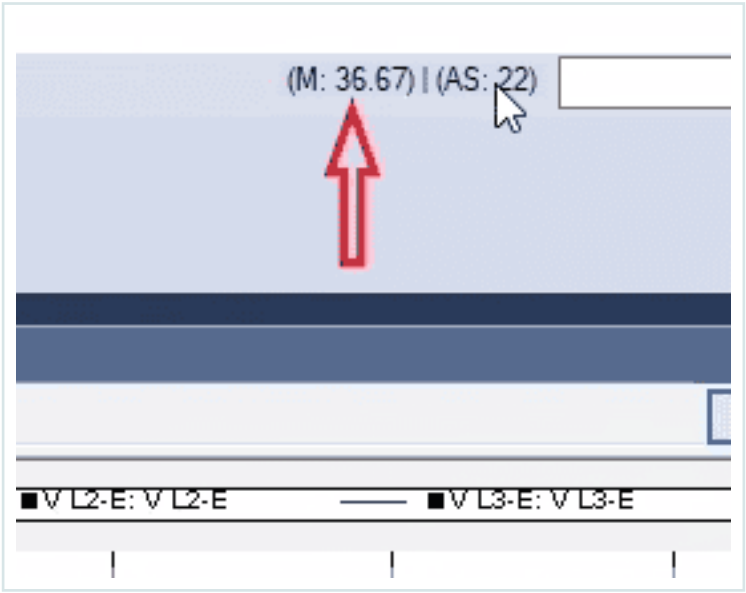

Şekil 7


2- “AS”, yani “Auto Save”, dosyada bir değişiklik yaptığınızda bu seçeneğin karşısında belirtilen süre geçtikten sonra yazılımın dosyanın mevcut durumunu otomatik olarak kaydetmesi anlamına gelir. Daha önce kaydedilmiş bir dosya varsa, yeni dosya mevcut dosyanın üzerine yazılır. Dosya

kaydedildikten sonra sayfanın alt kısmında “Auto Save Done” mesajı görüntülenir.

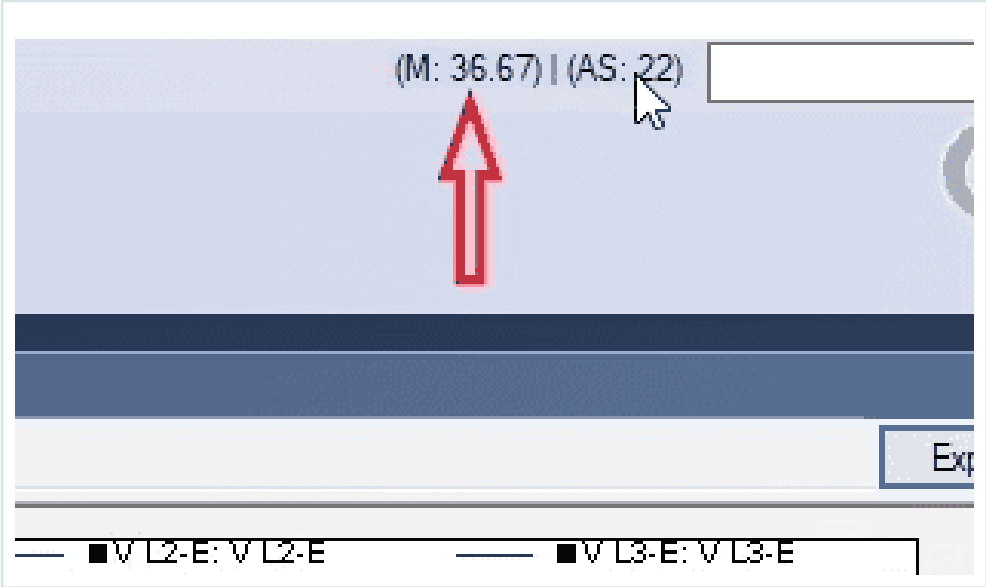

Şekil 8


Yazılım bu kaydetme işlemini varsayılan olarak her 30 saniyede bir tekrarlar. Bu süre, “Preferences” sayfasındaki “Room” sekmesinde bulunan “Auto Save” bölümünden değiştirilebilir. Otomatik olarak kaydedilen dosya “Recovery” seçeneğinde görüntülenir. Yazılım herhangi bir nedenle çökerse, “Recovery” seçeneğine tıklayarak dosyanızın son kaydedilen sürümünü geri yükleyebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bu özellik yazılımın önemli avantajlarından biridir. Çünkü “Ctrl+Z” tuş kombinasyonu ile yapılan değişiklikler bu 30 saniyelik otomatik kayıt aralıklarına göre geri alınabilir ve yazılımın çökmesi durumunda test dosyasının kaybolması önlenir.

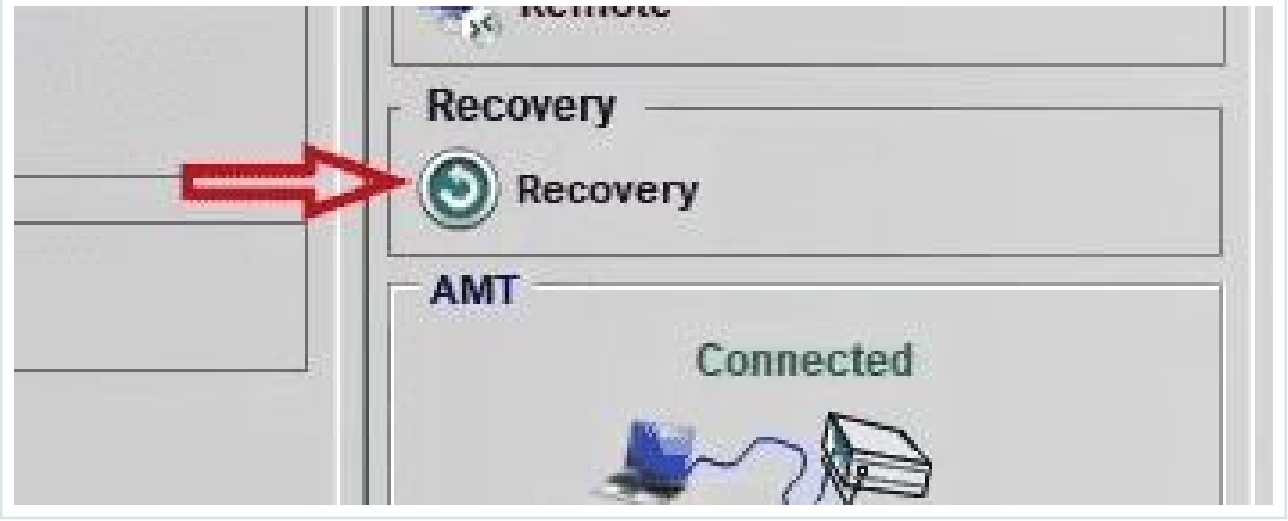

Şekil 9


Şekil 10

“Security” seçeneğine tıklandığında iki seçenek açılır. Bunlardan “Clear Cache” seçeneği, yazılımın önbelleğini temizlemek için kullanılır.

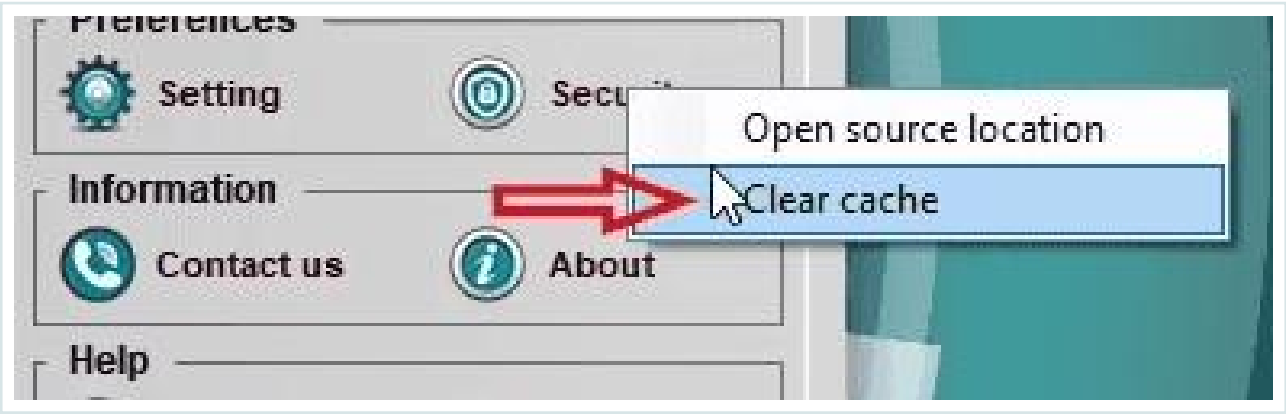

Şekil 11

Yazılımı ilk kez kurduğunuzda, hem “AMPro Application” hem de “AMPro APP Launcher” dosyalarını yönetici olarak çalıştırmak için “Open Source Location” seçeneğine tıklamanız gerekir. Bunun için belirtilen dosyalara sağ tıklayın, ardından “Properties” seçeneğini seçin. “Compatibility” sekmesinde “Run this program as an administrator” seçeneğini işaretleyin. Daha sonra pencereyi kapatabilirsiniz.

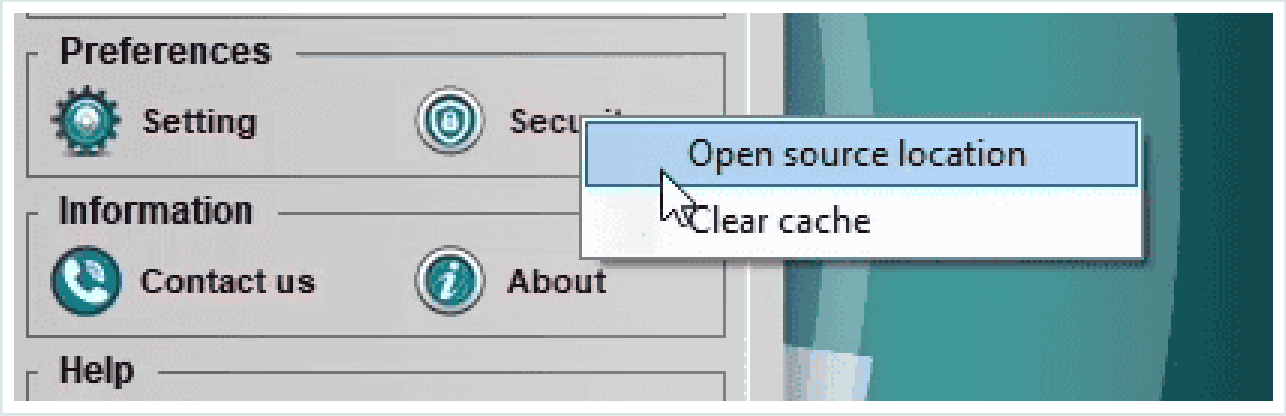


Şekil 12

“Contact us” seçeneği, Vebko uzmanlarıyla iletişime geçebileceğiniz yöntemleri sunar.



Şekil 13

“About” seçeneği, kullanıcıya Vebko şirketi hakkında bilgi sağlar.

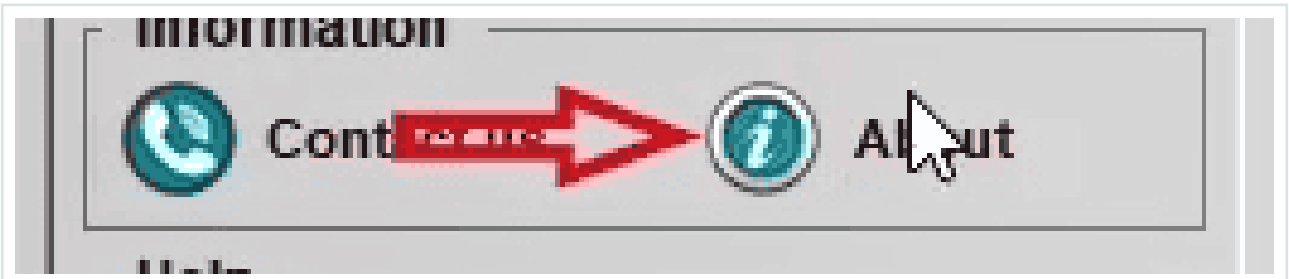


Şekil 14

“Help” seçeneğine tıklandığında, kullanıcı röle test cihazına ve yazılıma ait referans kılavuzlarına erişebilir.



Şekil 15

“AMT” bölümünde çeşitli işlemler gerçekleştirilebilir. “Control” tuşuna basılı tutup bu görsele sol tıklayarak cihaza doğrudan bağlanabilir veya bağlantıyı kesebilirsiniz. Bu bölümdeki simge, cihazın bağlantı durumunu gösterir. Bu bölüme çift tıklayarak doğrudan “Preferences” sayfasına geçebilirsiniz. Aynı anda birden fazla cihaza bağlanmak istiyorsanız, bu bölüme sağ tıklayın ve bağlanmak istediğiniz cihazın adını seçin. Bu işlemden sonra cihazın adı ekranın sol tarafında görüntülenir.

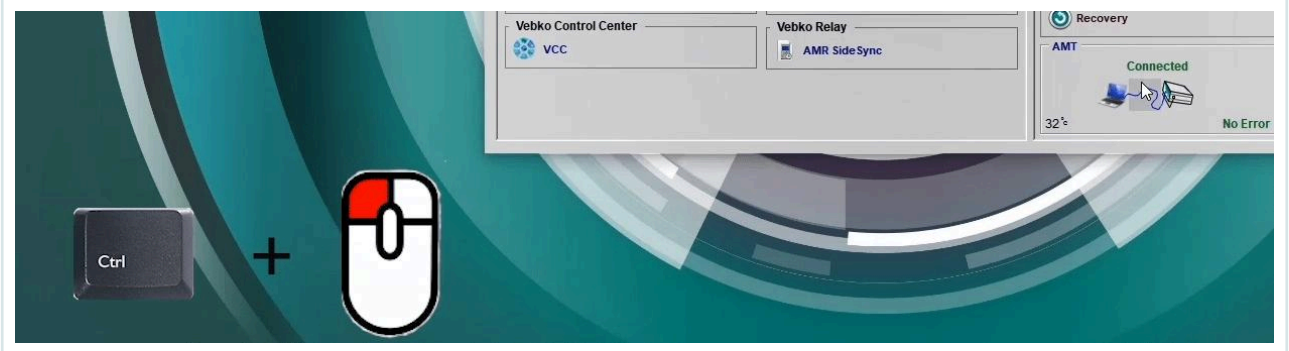

Şekil 16

Yazılım Başlangıç Sayfası